


Radiología Digital, Simplificada.



El sistema de Radiología Digital (DR) Universal DR es una solución económica que simplifica la transición de análogo a digital.

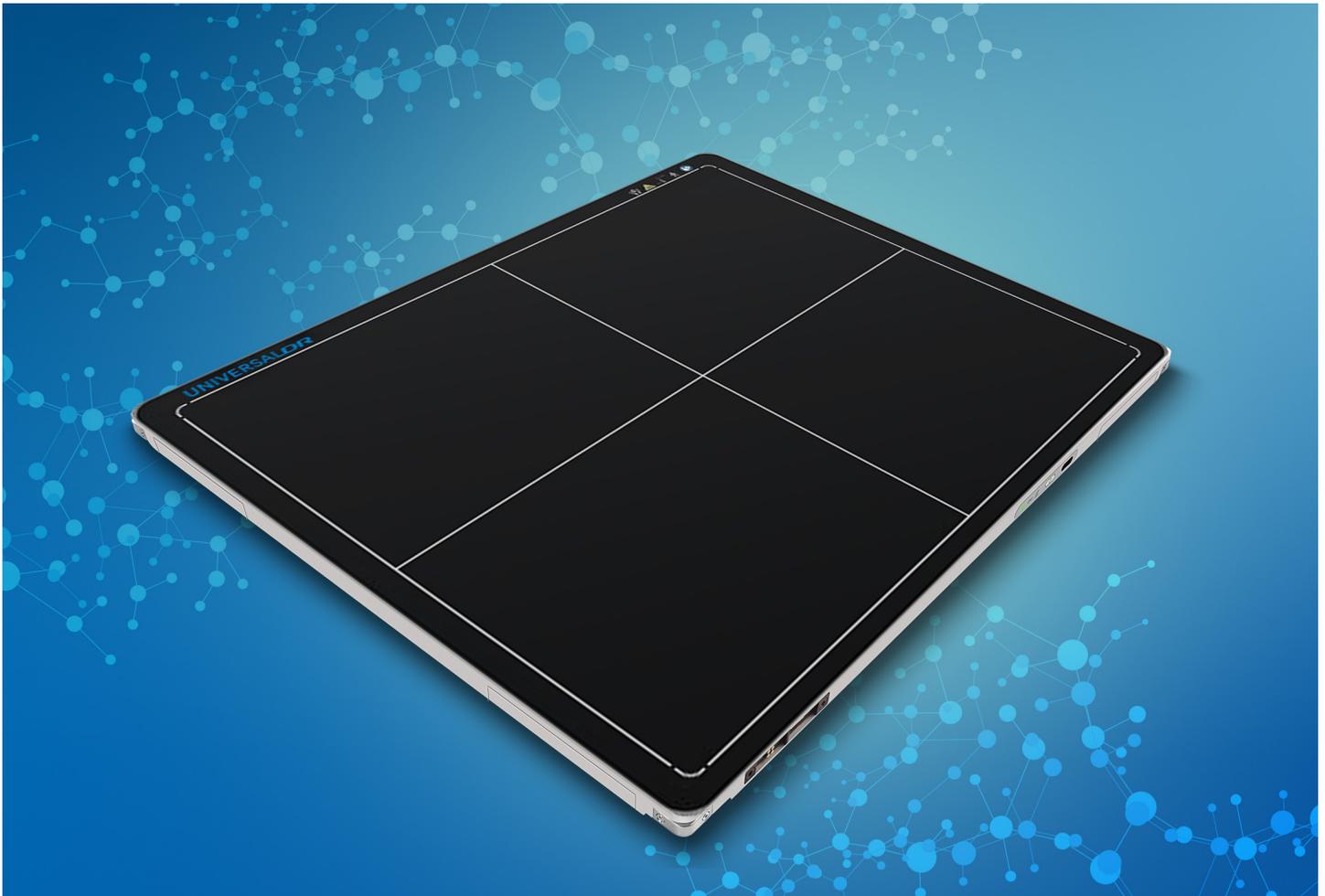

ULTRA

- La combinación de funciones avanzadas de manejo y proceso de imágenes de análogos a digitales simplifica la operación y el uso para radiografía en general
- El detector de yoduro de cesio (CSI), en conjunto con el software de procesamiento de imágenes ULTRA, brinda una calidad de imagen excepcional y la combinación adecuada de funciones avanzadas en un software simplificado para todas las aplicaciones de radiografía general
- Con la Detección Automática de Exposición le permite una instalación y puesta en operación rápidas, sin necesidad de modificación o conexión al equipo de rayos X
- Los detectores inalámbricos del Universal DR están disponibles en tamaños 14" x 17" y 17" x 17" y son compatibles con cualquier sistema de rayos X estándar

Software de adquisición de imágenes ULTRA

La solución de actualización a Radiografía Digital o DR Retrofit combina el detector **Universal DR** con el personalizable software de procesamiento de imágenes **ULTRA**. La interfaz de usuario intuitiva con un diseño de flujo de trabajo inteligente que le permite la gestión de los exámenes en una sola pantalla, mejora el flujo de trabajo de imágenes en general, ahorrando tiempo para el usuario y el paciente.

Universal DR lo ayudara a simplificar la transición de análogo a digital.

Características principales del software

- Conectividad compatible con el estándar DICOM y RIS / PACS , incluyendo DICOM store y MWL
- Herramienta de mapeo de códigos de procedimientos
- Anexos de estudio
- Anotación de texto libre
- Enmascaramiento automático
- Filtro de lista de estudios
- Historial
- Zoom de imagen
- Supresión de cuadrícula
- Habilitación de conformidad con HIPAA (protección de contraseña, bloqueo de pantalla)
- Foldering (para combinar y mover estudios)



AeroRemote® Insights

El servicio de monitoreo para AeroDR AeroRemote Insights, basado en la nube, es una herramienta analítica fácil de usar que ayuda a las instituciones a administrar mejor sus activos de radiografía digital. Esta se ofrece con los sistemas Universal DR.


Obtenga métricas actualizadas de los volúmenes de procedimientos, desempeño del personal, y el estado del sistema, lo que facilita la toma de decisiones rápidas y seguras sobre los aspectos críticos del desempeño de su departamento.

La información diaria se puede visualizar sin problema en gráficas comprensibles que ayudan a evaluar la productividad e identificar, por ejemplo, oportunidades de capacitación, así como mejorar la gestión de activos.

Usted puede optar por AeroRemote Insights con los contratos de servicio **Blue Moon Select** o adquirirlo como una suscripción independiente.

Planes de ciclos de vida Blue Moon

Evite los costos no presupuestados de eventos inesperados y obtenga acceso inmediato al soporte diario que necesita en el momento que lo necesite con los planes de Blue Moon. Continuamente agregamos nuevo valor a nuestros planes para ofrecer más opciones.

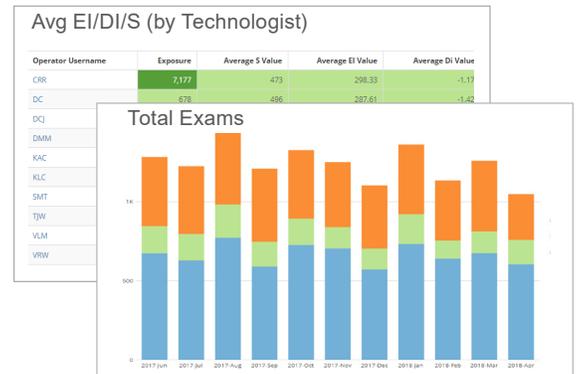

BLUE MOON

